

製品仕様

ワイヤレス光電センサー

ワイヤレス光電センサー
[品番 B950]



本体	サイズ	W980mm×H76mm×D65mm
	重量	650g
	電源	AC電源アダプタ
	検知範囲	90cm×50cm(ビーム10本)
受信機	電波到達距離	約20m(ナースコール)
	サイズ	85mm×65mm×(厚)25mm
	重量	85g
	設置場所	屋内
アクリル固定台	電源	AC電源アダプタ
	中断機能	1分～5分(1分毎の設定可能)
	サイズ	120mm×120mm×150mm
材質	アクリル板	

ビームセンサー

ビームセンサー
[品番 B301]



サイズ	62mm×35mm×(厚)18mm
ケーブル長さ	5m(中間にコントロールボックスあり)
電源	AC電源アダプタ
ビーム距離設定	0.2m～2m(任意設定)
ビーム遮断時間設定	0秒、1秒
オプション	固定ポール[品番:SC-200]

【ご注意】

※本製品は、センサーの反応を通知する報知連絡用装置であり、医療機器ではありません。
また、転倒・転落事故の防止を保証するものではありません。
介護などの補助手段として使用してください。
万一発生した人身事故、災害事故による損害につきまして弊社は一切責任を負いません。
(※1)ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります。
(※2)車椅子センサー部は消耗品になります。

●開発・製造元：株式会社メディカルプロジェクト

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は販売店でお確かめ下さい。

●販売元

S.M.C.グループ
sanwa 三和ニューテック株式会社

東日本営業所 東京都千代田区九段北1-3-1 VORT九段下7F
〒102-0073 ☎(03) 3265-3431(代表) FAX(03) 3265-3588

西日本営業所 大阪市北区西天満5-1-1 セヤマビル7F
〒530-0047 ☎(06) 4709-7007(代表) FAX(06) 4709-7008

九州営業所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-22 Sビル5F
〒810-0073 ☎(092) 738-8411(代表) FAX(092) 738-8423

Webサイト <http://web.sanwa-newtec.co.jp/>

クリップセンサー

クリップセンサー パーソナルアラームエッセシャルⅢ(ナースコール連動タイプ)
[品番 8373-3]



ユニット本体 (ナースコール連動タイプ)	電源	角型アルカリ電池9V
	アラーム音	8種類
	メロディー	8曲
	録音	1種類
	ボリューム	大・小・無音

クリップセンサー パーソナルアラームエッセシャルⅢ(メロディー音タイプ)
[品番 8373L]



ユニット本体 (メロディー音タイプ)	電源	角型アルカリ電池9V
	アラーム音	8種類
	メロディー	8曲
	録音	1種類
	ボリューム	大・小・無音


ワイヤレスクリップセンサー
[品番 M8202W]



本体 (無線発信機内蔵)	電源	単4アルカリ乾電池3本使用
	ナースコール呼出し	ワンショット
	電波到達距離	20m
	報知音	2種類
無線受信機	電源	AC電源アダプタ
	ボリューム	4段階(70db・80db・90db・無音)

車椅子センサー

車椅子センサー
[品番 M8350]



アラーム ユニット	サイズ	78mm×120mm×30mm(取付ホルダー含む)
	アラーム音	2種類
	録音	1種類
	電源	単4アルカリ乾電池3本使用
	センサーサイズ	300mm×300mm
	ボリューム	3段階

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ




病院・介護施設用 離床センサー

ビームセンサー
ワイヤレス光電センサー
クリップセンサー
ワイヤレスクリップセンサー
車椅子センサー


「みまもりの現場を支えたい。」

転倒・転落の対策および予防のお手伝い

ワイヤレス光電センサー
10本の見えないビームで検知します。

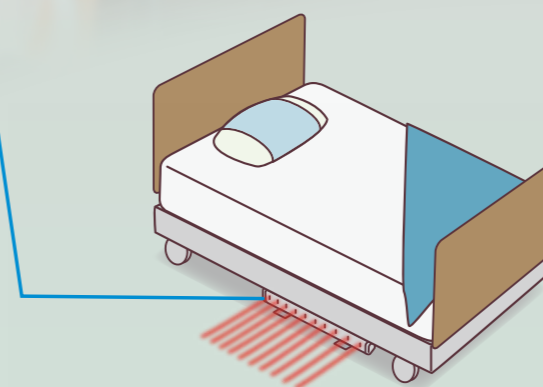


ビームセンサー
見えないビームで検知します。

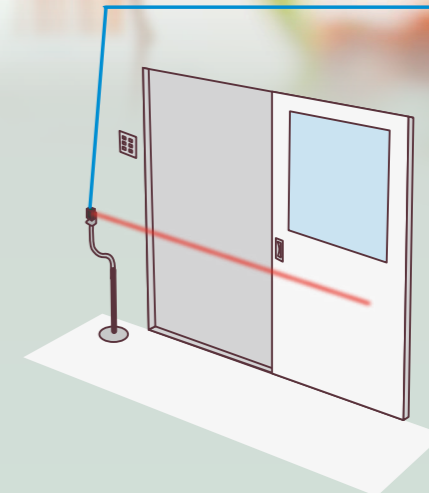

クリップセンサー
衣類に取り付けたマグネットクリップ付紐が外れると報知します。

パーソナルアラームエッセシャルⅢ(ナースコール連動タイプ)
パーソナルアラームエッセシャルⅢ(メロディー音タイプ)
ワイヤレスクリップセンサー

車椅子センサー
車椅子からの立ち上がりを音で報知します。

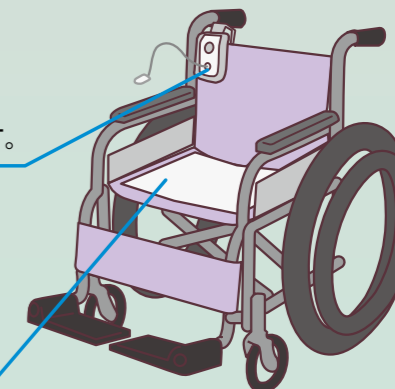

イラストはイメージです。

2022年12月現在

ベッド周辺のみまもり用

ワイヤレス光電センサー

見えない10本の光電ビームが90cm×50cm範囲を検知するとナースコールで報知します。
見えないマットセンサーとしてご利用いただけます。



ナース
コール
対応

ワイヤレス光電センサー
品番:B950

ビームはイメージです。



目に見えない
センサーで
ストレスフリー


写真はイメージです。

- マットセンサー不要のため跨ぐことはありません。
- マットセンサー不要のため故障が減少します。
- マットセンサー不要のため清潔です。
- 中断機能によりスイッチの入れ忘れがありません。

付属品	光電センサー本体 受信機 アクリル固定台 各機AC電源アダプタ ナースコール接続アダプタ(※1)
-----	--

ビームセンサー

ビームが遮断されると感知します。
ベッドや部屋の出入口に設置して見えないセンサーとしてご利用いただけます。

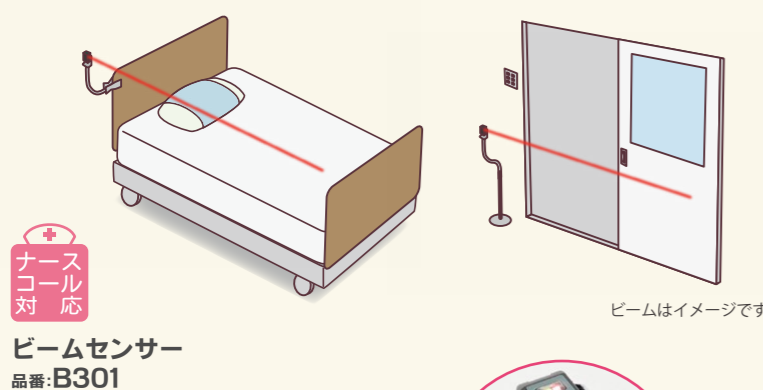

ナース
コール
対応

ビームセンサー
品番:B301

ビームはイメージです。

- 体圧センサーのように体重差による誤動作がありません。
- ビームは0.2m~2mの範囲で任意の距離に設定可能です。
- ナースコールはワンショット呼び出しで、解除ボタンを押すだけです。
- 床に設置しないので衛生的です。
- 設置場所を変えると、感知するタイミングを変えることができます。
- 消耗品がなく経済的です。

付属品	ビームセンサー本体 AC電源アダプタ フレキシブルアーム式固定具(標準品) ※固定ボールのオプション品あり ナースコール接続アダプタ(※1)
-----	--


固定ボール
品番:SC-200
※オプション

写真はイメージです。

患者様周辺のみまもり用

クリップセンサー

衣類に紐の付いたマグネットクリップを付けて、起き上がってアラームユニットから外れると報知します。
1台でベッド用センサーとしても車椅子用センサーとしてもご利用いただけます。

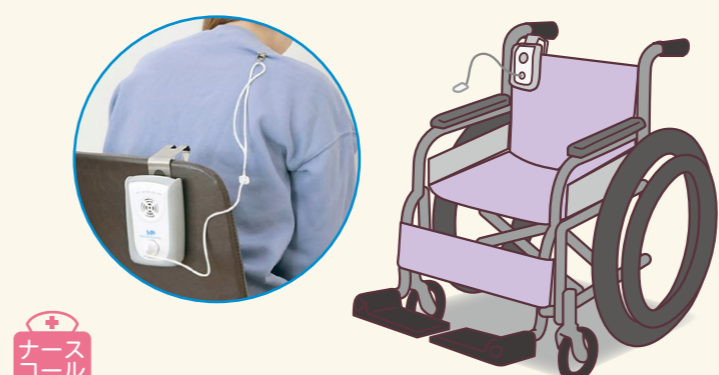

ナース
コール
対応

パーソナルアラームエッセンシャルⅢ
(ナースコール連動タイプ)
品番:8373-3

パーソナルアラームエッセンシャルⅢ
(メロディー音タイプ)
品番:8373L



- 紐の付いたマグネットクリップがアラームユニットから外れると報知します。
- メロディー音のみで報せるタイプ(8373L)とナースコールに連動可能なタイプ(8373-3)があります。
- ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役です。
- その他、多用途に使用可能(ベッド柵・扉など)です。

付属品	ナースコール連動タイプ (8373-3)
	ユニット本体 角型アルカリ電池9V(1本) 取付具 マグネットクリップ(予備1本) ナースコール接続アダプタ(※1) ナースコールケーブル3m
付属品	メロディー音タイプ (8373L)
	ユニット本体 角型アルカリ電池9V(1本) 取付具 マグネットクリップ(予備1本)

ワイヤレスクリップセンサー

ワイヤレスクリップセンサー
品番:M8202W




- ワイヤレスでセンサーにコードがありません。
- ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役です。
- ナースコールに連動します。

付属品	クリップセンサー本体(無線発信機内蔵) 無線受信機 取り付けホルダー ナースコール接続アダプタ(※1)
-----	--

車椅子センサー

車椅子から立ち上がるとアラーム音で報知します。

車椅子センサー
品番:M8350

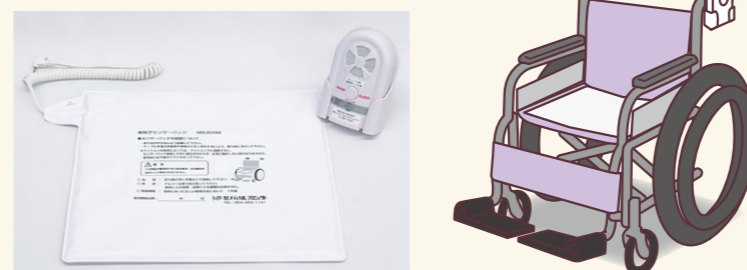

- 座面上にセンサーパッドを敷いて、重量(体重)がなくなることで報知します。
- アラーム音は2種類から選択可能です。また、録音1種類も対応できます。
- 座ると自動的に検知スタートします。

付属品	アラームユニット(取付ホルダー付き) 車椅子センサー(※2)
-----	-----------------------------------

(※1) ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります。(※2) 車椅子センサー部は消耗品になります。